


Assembly Instruction FloorLine LTC

Requirements

- 1) Mains Power Outlet/Power -point
- 2) 5mm Allen Key for countersunk bolts
- 3) 13mm Spanner/Socket Wrench
- 4) 2 people for assembly

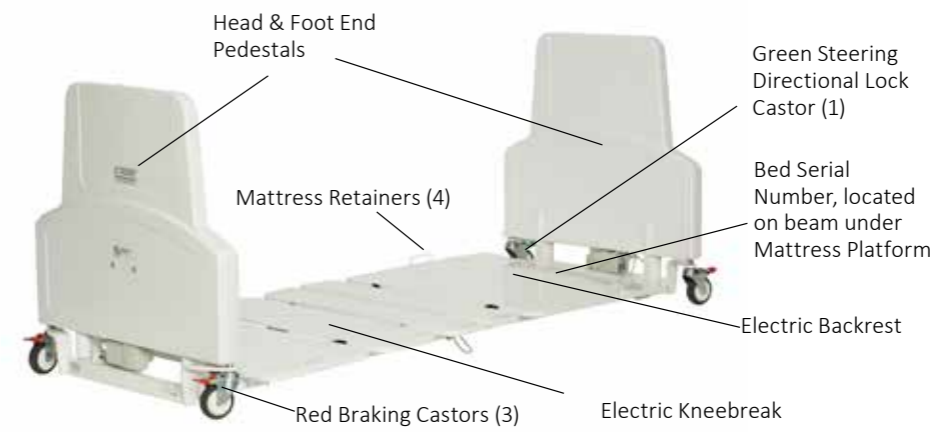

The bed is delivered, folded and packed in one carton with its own handset. Ensure the bed carton is received in the correct upright position, as marked on the carton.




Place Head Pedestal End (the side with the green castor) against a wall. One person must support the bed from prematurely unfolding. The second person uses the 13mm spanner, to remove the two foot end screws.




Remove the 2 centre platform lanyard pivot pins (one on either side) of the centre hinge.




Unlatch the metal transport latch that holds the beams together, located on one side, near the red castors. (One person still supports the bed from unfolding)

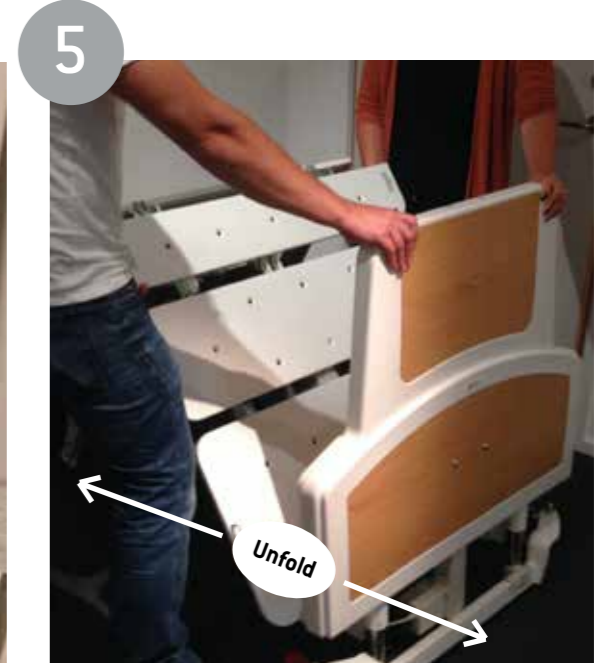

Standing either side of the centre section, unfold the mattress platform. **Take care not to trap fingers when unfolding!**

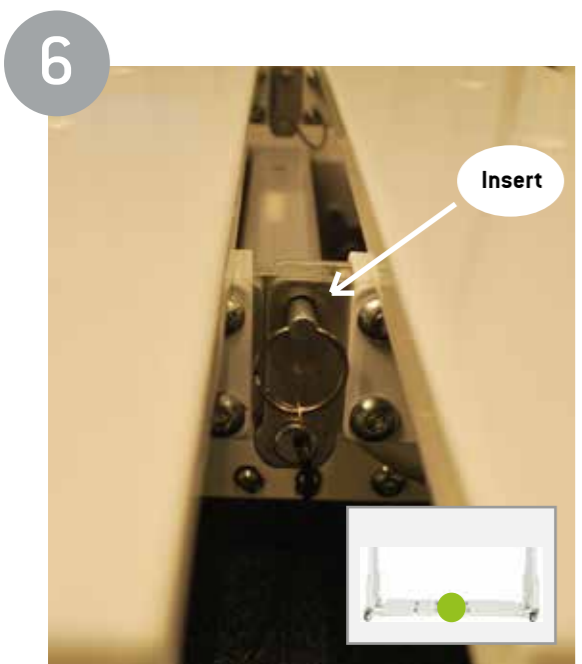

Re-insert the 2 locking lanyard pins, to lock the mattress platform into a flat position.

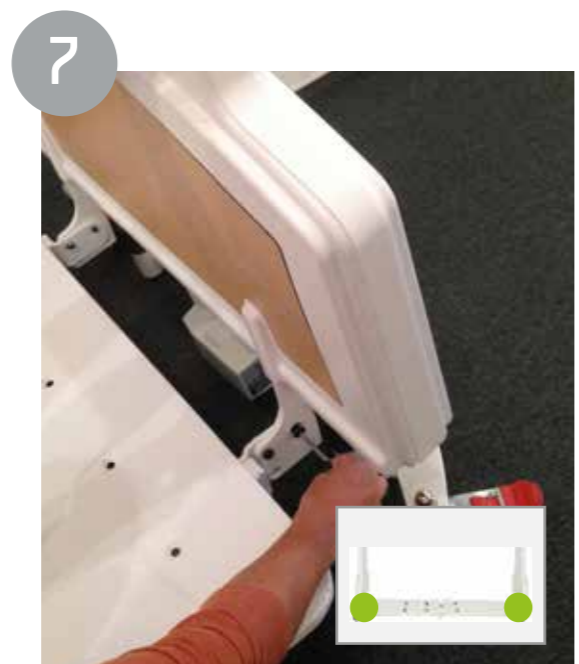

Raise the Head end and foot end pedestal on each side into an upright position and re-fit the two screws. (2 on each side)



Attach the mattress retainers on both sides of the bed. 2 on each side.





Plug the Mains Power Cable into the Power-Point/Wall Socket and start using the bed. NOTE: Back-Up Battery (if fitted) will take 24 hours to charge, before it can be used.

Monteringsinstruktion – FloorLine LTC

Detta behövs!

- 1) Ett eluttag/en späningsenhet
- 2) En insexnyckel på 5 mm för försänkta skruvar
- 3) En hylsnyckel på 13 mm för Nyloc-muttrar.
- 4) 2 personer för montering

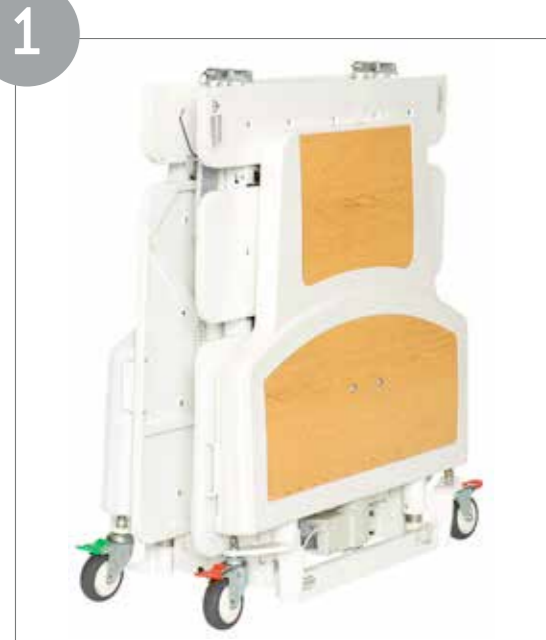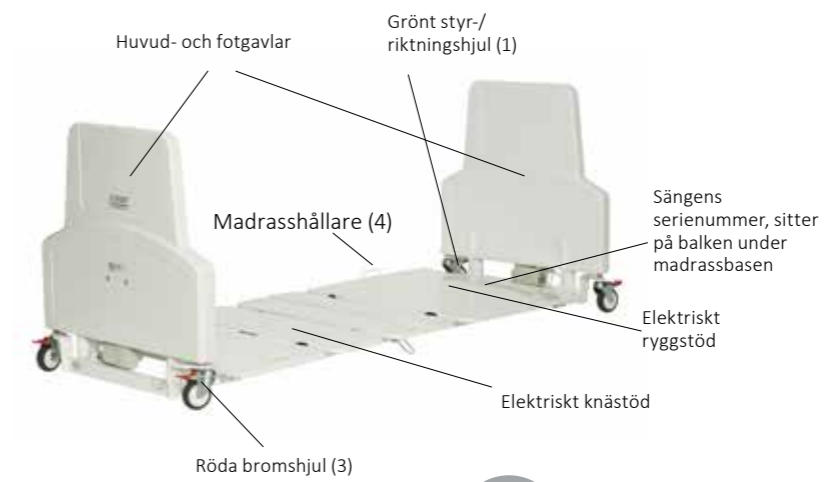

Sängen levereras ihopfälld och packerat i en kartong. Se till att kartongen är levererad i korrekt position så som markerat på kartongen.




Placera sängens sida med gröna hjul mot väggen. En person måste supportera sängen från att veckla ut sig. Den andra personen använder insexnyckeln (13 mm) för att ta bort skruvarna på båda sidor av sängen.




Ta bort de två sprintarna (en på varje sida).




Lossa haken som håller sängen samman (finns på ena sidan av sängen nära de röda hjulen) En person supporterar fortfarande sängen från att veckla ut sig.

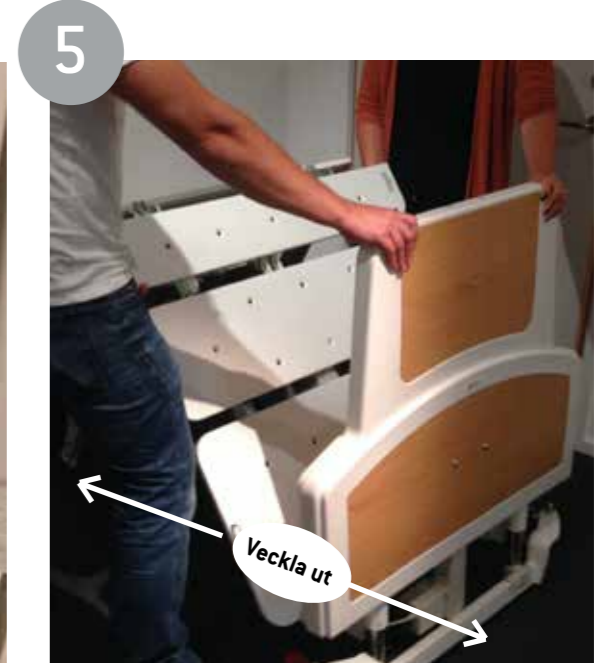

Stå en person på varje sida av sängen och veckla försiktigt ut madrassplattformen. **Var försiktig så att ni inte klämmer några fingrar under utfällningen!**

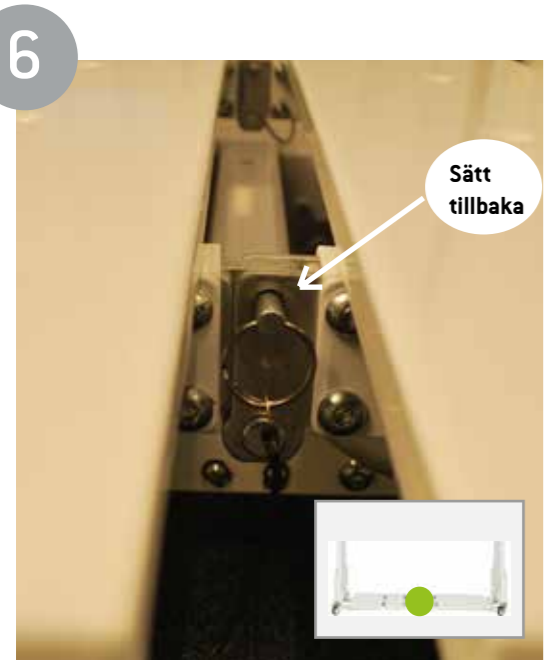

Sätt tillbaka sprintarna (en på varje sida) för att låsa madrassplattformen i plant läge.

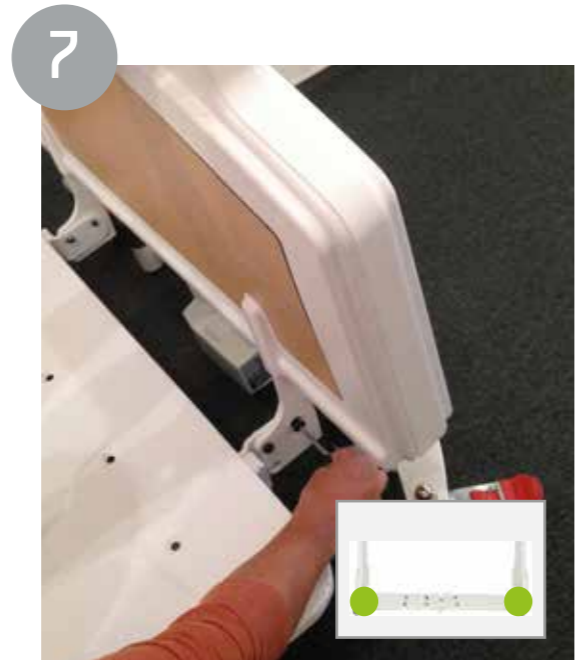

Fäll upp huvudändan och fotändan på sängen till en upprätt position och skruva tillbaka skruvarna i hålen. (2 på varje sida)



Sätt dit de 2 madrasshållarna på varje sida av sängen.



Sätt in elsladden och börja använda sängen! OBS! om du har ett back-up-batteri tar det 24 timmar att ladda innan sängen kan användas.