



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.



neXus Accessory kit

User Manual





EN

Remove present Soft Bag

Remove the present soft bag from the attachment.

FR

Retirez le Sac souple actuel

Retirez le Sac souple actuel de la fixation.

DE


Vorhandenen Soft Bag entfernen

Lösen Sie den vorhandenen Soft Bag von der Befestigung.

NL

Verwijder de aanwezige Soft Bag

Haal de aanwezige Soft Bag van het bevestigingspunt.

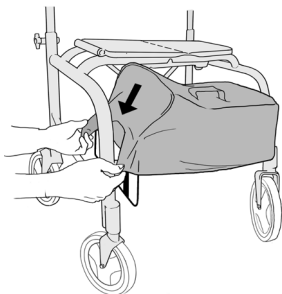

EN

Attach new soft bag

Attach the new soft bag on the attachments.

FR

Attachez un nouveau Sac souple

Attachez le nouveau Sac souple sur les fixations.

DE


Neuen Soft Bag anbringen

Bringen Sie den neuen Soft Bag an den Befestigungsstellen an.

NL

Bevestig de nieuwe Soft Bag

Bevestig de nieuwe Soft Bag aan de bevestigingspunten.

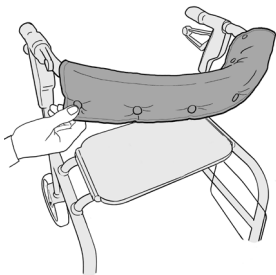

EN

Attach back strap

Attach the back strap over the back rest using the push buttons.

FR

Attachez la sangle arrière

Attachez la sangle arrière sur le dossier à l'aide des boutons-poussoirs.

DE

Rückengurt anbringen

Befestigen Sie den Rückengurt über der Rückenlehne mithilfe der Druckknöpfe.

NL

Bevestig de achterband

Bevestig de achterband aan de rugleuning met de drukknopen.

1.



2.



3.



EN

Remove seat handle

1. Fold the rollator to make the strap more loose. Turn the handle.
2. Push the metal clip out from the groove.
3. Drag the strap through the holes in the seat.

FR

Retirez la poignée du siège

1. Pliez le déambulateur pour que la sangle soit plus lâche. Tournez la poignée.
2. Poussez le clip en métal hors de la rainure.
3. Passez la sangle à travers les orifices dans le siège.

DE

Sitzgriff entfernen

1. Klappen Sie den Rollator zusammen, damit der Gurt lockerer sitzt. Drehen Sie den Griff.
2. Drücken Sie die Metallspange durch den Schlitz.
3. Ziehen Sie den Gurt durch die Öffnungen im Sitz.

NL

Verwijder de handgreep van de zitting

1. Klap de rollator dicht om de band lossier te maken. Draai de greep om.
2. Druk de metalen clips uit de gleuf.
3. Trek de band door de gaten in de zitting.

1.



2a.



2b.



EN

Attach new seat handle

1. Feed the handle strap with pin from the top of the seat pad, with logo facing towards you.
2. Pull the strap through the holes in the seating mechanism.

FR

Attachez la nouvelle poignée de siège

1. Faites passer la sangle de poignée avec la goupille depuis le haut du coussin de siège, avec le logo vers vous.
2. Passez la sangle à travers les orifices dans le mécanisme de l'assise.

DE

Neuen Sitzgriff anbringen


1. Führen Sie den Griffgurt mit dem Endstück von der Oberseite des Sitzpolsters; das Logo zeigt dabei nach oben.
2. Ziehen Sie den Gurt durch die Öffnungen im Sitzmechanismus.

NL

Bevestig de nieuwe handgreep aan de zitting

1. Voer de band met de pen in vanaf de bovenkant van het zitkussen met het logo naar u toegedraaid.
2. Trek de band door de gaten in het zittingsmechanisme.

3a.

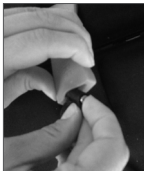

3b.



4.



EN

3. Pull the pin through the hole on the side of the handle.
4. Once through, place pin in the groove to secure.

FR

3. Tirez la goupille à travers l'orifice sur le côté de la poignée.
4. Une fois la goupille passée, placez-la dans la rainure pour la bloquer.

DE

3. Ziehen Sie das Endstück durch die seitliche Öffnung am Griff.
4. Drücken Sie das Endstück anschließend in den Schlitz, um den Gurt zu fixieren.

NL

3. Trek de pen door het gat aan de achterkant van de handgreep.
4. Als de pen door het gat is, plaatst u deze in de gleuf om vast te zetten.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21C
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com
www.humancare.se

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone:- 613.723.6734
Fax:- 613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com
www.humancaregroup.com

HUMAN CARE HOLLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: 0577-412171
Fax: 0577-412170
info.nl@humancaregroup.com
www.humancaregroup.com

HUMAN CARE USA

4210 S. Industrial Drive, Suite 160
Austin, TX 78744
Phone: 512.476.7199
Fax: 512.476.7190
info.us@humancaregroup.com
www.humancaregroup.com

HUMAN CARE AUSTRALIA

Unit 9, 271 Wells Road
Chelsea Heights, Victoria 3196
Phone:- +61 3 8773 1111
Fax:- +61 3 9773 4008
info.au@humancaregroup.com
www.humancaregroup.com



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.

