



Gebruikersgewicht tot 180 kg
Variabele jukken
Compact en opvouwbaar



Ideale tillift voor vele situaties

Diana I is een uiterst stabiele, elektrisch bedienbare en gebruikersvriendelijke tillift voor zorgvragers in de passieve mobiliteitsklasse. Transfers zijn eenvoudig, veilig en comfortabel uit te voeren in zowel zittende als liggende positie. Deze tillift is goed wendbaar en ideaal te gebruiken in compacte ruimtes.



Diana I biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed, in/uit een (rol)stoel, op/af het toilet en zelfs vanaf de vloer. Door zijn compacte maatvoering is Diana I ideaal voor gebruik in situaties met beperkte ruimte, zoals thuis, bij smalle deurposten en in sanitaire ruimtes. De grote en kwalitatief duurzame zwenkwielen maken de tillift gemakkelijk te manoeuvreren.

Diverse tilmogelijkheden

Diana I is met 3 verschillende jukken leverbaar: een vierpunts manueel kanteljuk voor tilbanden met clips, een tweepunts juk of vierpunts juk voor tilbanden met lussen. Het manuele vierpunts kanteljuk is voorzien van paddenstoelbevestigingen waardoor de E-clips van onze tilbanden veilig bevestigd kunnen worden. Het kanteljuk is in zowel lig- als zitstand te gebruiken voor het positioneren van de cliënt. Uniek aan onze tilbanden is de veilige bevestiging middels een E-clip.



De Diana I kan eenvoudig en snel worden ingeklapt om compact te worden opgeslagen.

De mechanische pootspreiding met een voetpedaal, maakt het mogelijk de tillift om een stoel/toilet te plaatsen om zo dicht mogelijk bij een cliënt te komen zodat de transfer ergonomisch verloopt

De universele E-clip is een bewezen bevestiging voor de tilband aan een tillift, waardoor de kans op fouten aanzienlijk wordt verkleind. De clip wordt om de paddenstoelbevestiging van het tiljuk gelegd en sluit zich met een duidelijke 'klik'. Onze tilbanden bieden optimale ondersteuning voor extra betrouwbare, comfortabele en veilige transfers.



Accessoires



4-punts kanteljuk clip
Handmatig bedienbaar kanteljuk, voorzien van bevestiging voor E-clip slings.
Art.nr 92916



2-punts lussenjuk
Tiljuk met 2-puntsbevestiging voor een tilband voorzien van lussen.
Art.nr 72754 (35 cm)
Art.nr 72755 (45 cm)
Art.nr 72757 (60 cm)



4-punts lussenjuk
Tiljuk met 4-puntsbevestiging voor een tilband voorzien van lussen.
Art.nr 92938



Human Care Tilbanden
Wij leveren tilbanden voor elk type transfer voor zowel volwassenen als ook kinderen in verschillende maten, materialen, gewichtsklassen en uitvoeringen in zowel E-clip en lussen tilbanden.

Gebruik



Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren in bed.



Van en naar de stoel
Geschikt voor het transfereren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.



Tillen vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf de vloer.



Toiletbezoek
Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.


Kenmerken



Zwenkwielen
2 dubbele, beremde zwenkwielen (0 100 mm, achter) en 2 dubbele, ongeremde zwenkwielen (0 100 mm, voor).



Handbediening
Gebruikersvriendelijke handbediening, eenvoudig in gebruik, ergonomisch ontwerp.

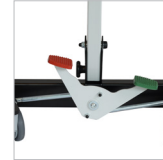

Voetpedaal
Voetpedaal voor manuele pootspreiding.



Duwhandvatten
Ergonomisch vormgegeven duwhandvatten van comfortabel materiaal, waardoor ze prettig in de hand liggen.

Technische specificaties Diana I, artikelnummer: 100110

Lengte onderstel	1260 mm	Eigen gewicht	52 kg
Breedte onderstel	635 mm	Maximale tilcapaciteit	180 kg
Hoogte mast	1300 mm	Rotatie tiljuk	360 graden
Minimale breedte onderstel (intern - extern)	550-630 mm	Oplaadbare batterij (incl. laadsnoer)	Capaciteit 2,9 Ah
Maximale breedte onderstel (intern - extern)	630-1220 mm	Materiaal frame	Poedergecoat staal
Tilbereik	930-2140 mm (hefarm), bevestigingspunt tilband 480-1690 mm (92916)	Noodbediening	Ja
Draaicirkel	1250 mm	Handbediening functies	Hoog/laag, batterij status, service indicator
Hoogte onderstel	115 mm	Certificering	MD & CE
Diameter wiel	100 mm (achter) / 100 mm (voor)		

Configuraties

Diana I (art.nr: 100110) + 4-punts kanteljuk clip (art.nr: 92916)

Artikelnummer: 100100

Diana I (art.nr: 100110) + 2-punts lussenjuk, 45 cm (art.nr: 72755)

Artikelnummer: 100400

Diana I (art.nr: 100110) + 4-punts lussenjuk (art.nr: 92938)

Artikelnummer: 100500



We improve freedom of movement and quality of care for people.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com